


Overview & Quick Reference Guide

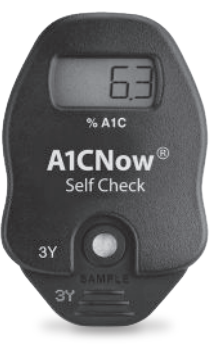

A1CNow® Self Check Test System


- IMPORTANT!**
- FIRST**, we strongly recommend you read all instructions carefully and watch the brief instructional video on our website at ptsdiagnostics.com. THEN, follow all steps as you perform the test.
 - Do not** open pouch until instructed.
 - Use gloves between 18°C - 25°C (64°F - 77°F) and out of direct sunlight.
 - Do not use if product is past the expiration date.
 - If the kit has recently been kept at temperatures outside the recommended conditions, keep the kit at room temperature for at least one hour before use.

Complete test within 15 minutes.

6 Open Foil Cartridge Pouch* AFTER Blood Collection

- Insert cartridge into analyzer immediately and use within 2 minutes.
- Tear foil pouch open at the notches on the sides.

Caution: Do NOT open foil pouch until this step. Use within 2 minutes of opening. If foil pouch is damaged, do not use.

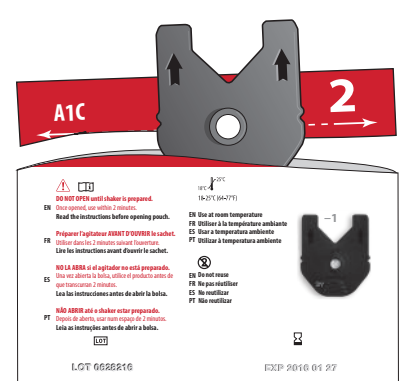


pts Diagnostics

1-877-870-5610 (toll-free) or +1-317-870-5610 (direct)
We invite you to call us and we will guide you through the test.

- DO NOT adjust your medication unless instructed to do so by your doctor or healthcare provider.**
- If you have any questions about your A1C result, please contact your doctor or healthcare provider.

Caution: This device contains material of animal origin and should be handled as a potential carrier and transmitter of disease.

If you are not able to access the instructional video on our website, we encourage you to call customer service at 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct) to walk you through the test.

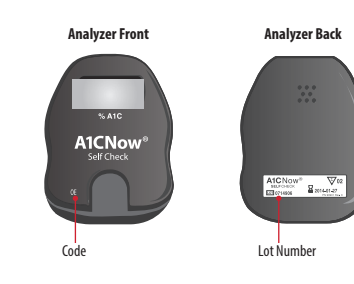

7 Insert Cartridge


- "Click" test cartridge into place.
- Analyzer and test cartridge codes must match.
- If codes do not match, call Customer Service at 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct).



Match codes
Analyzer and cartridge code must match. Call Customer Service at 1-877-870-5610 or +1-317-870-5610.


Match Lot Numbers

Use analyzer only with the materials included in the original kit. The analyzer will expire after the programmed number of tests have been run. If another test cartridge is inserted, the analyzer will display "001L".

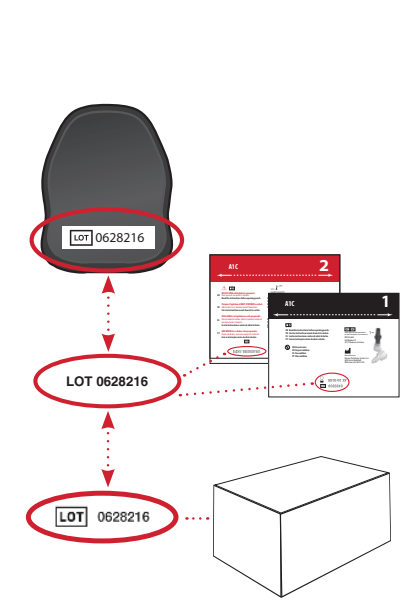


8 Prepare Shaker

Remove shaker base.

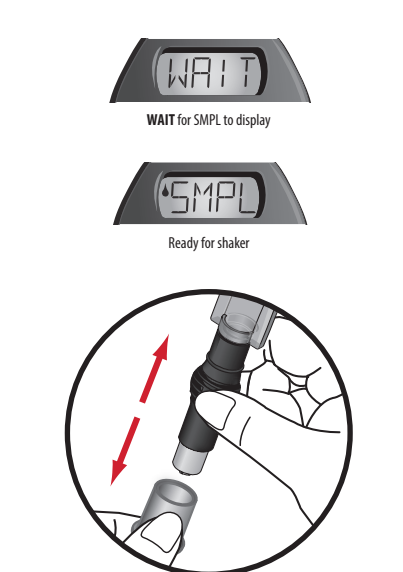


1 Open Plastic Shaker Pouch*

Do NOT open foil cartridge pouch until Step 6.

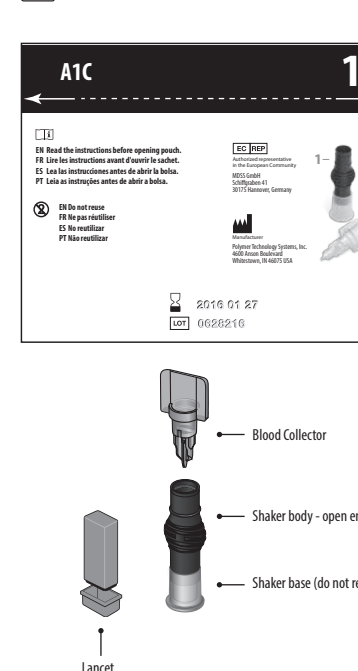

9 Dispense Sample into Cartridge


- Ensure analyzer is on level surface.
- Push down completely to dispense diluted sample and remove in a continuous motion.
- Remove sampler from cartridge quickly.
- "RUN" will appear.

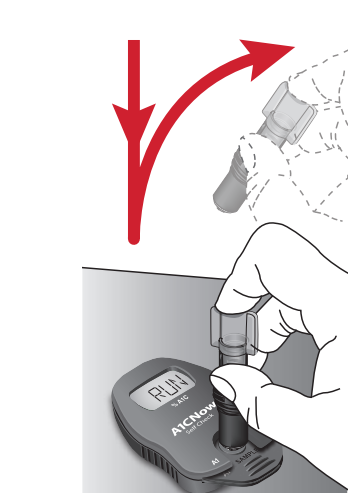


Do not handle analyzer again until test is complete!

2 Stick Finger

- Wash hands or clean with alcohol and dry before testing.
- Remove cap and press lancet into finger.
- Gently squeeze finger to get adequate blood.

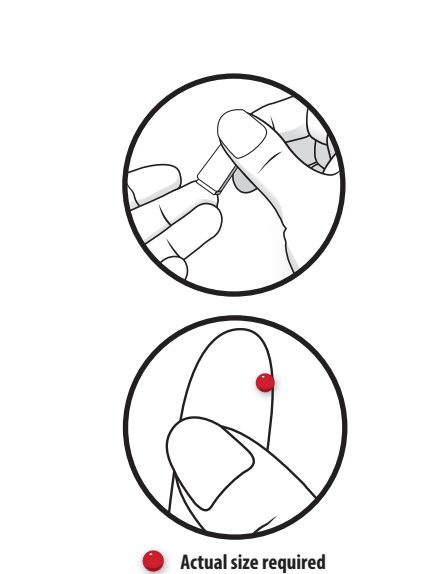


10 5 Minutes to Results

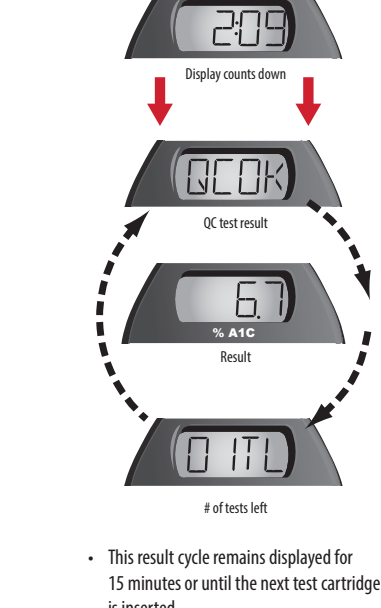

This result cycle remains displayed for 15 minutes or until the next test cartridge is inserted.
If "QC" is not displayed, please refer to the troubleshooting section or contact Customer Service.

3 Collect Blood

- Gently touch blood collector to top of blood drop in file.
- Make sure collector is adequately filled.

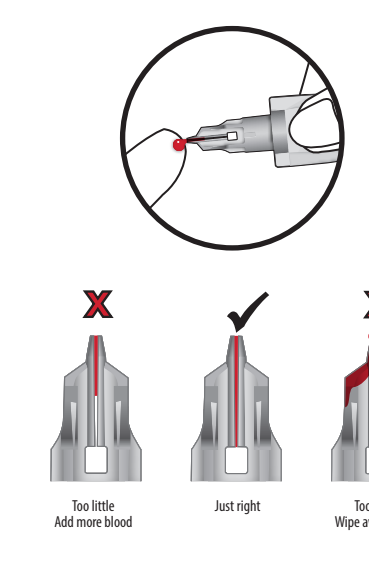

11 Dispose of Cartridge / Save Analyzer


- Dispose of cartridge in your household waste.
- Save analyzer for additional tests. Analyzer will display, for example, "011L" if there is one test left and "001L" if you just used your last test.
- Record your A1C result in the result log in Step 12.
- Analyzer will show result for 15 minutes and will turn off automatically.



NOTE: To run another test, use a new shaker, blood collector, test cartridge, and lancet from the same kit and return to Step 1.

4 Insert Blood Collector


- Fully insert blood collector into shaker body.
- Push hard while twisting to fully insert.

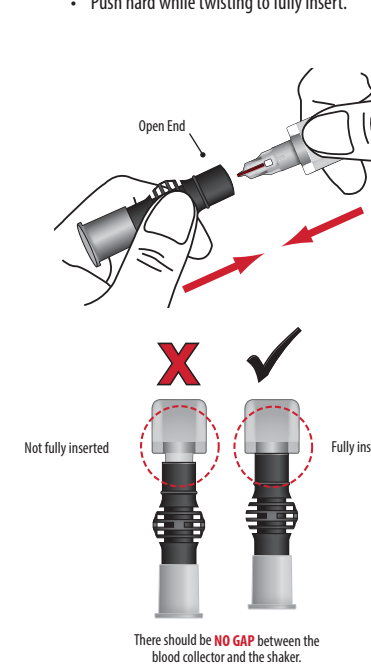

12 Log Result

Chart your progress here.


- Record your A1C results here, and bring this with you when you see your doctor. Mark down your A1C goal in the space provided.

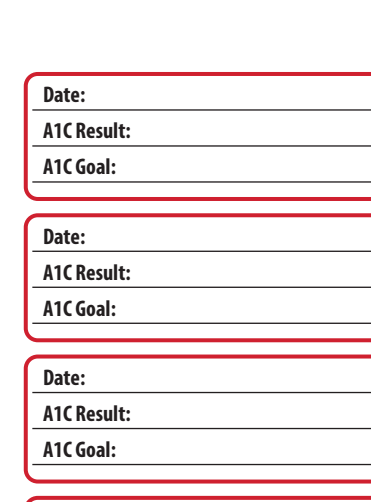

NOTE: To run another test, use a new shaker, blood collector, test cartridge, and lancet from the same kit and return to Step 1.

5 Mix

- Shake vigorously 6-8 times (about 5 seconds). This will mix the blood with the solution.
- Stand shaker on table while preparing cartridge.

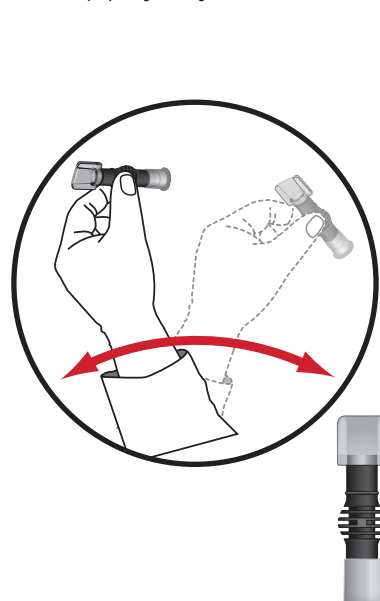

Result Interpretation

- Do not take any decision of medical relevance without first consulting your healthcare practitioner.
- When this device is used for monitoring of an existing disease, adapt the treatment only if you have received the appropriate training to do so.



* Pouch illustrations may vary.

Überblick & Kurzanleitung



A1CNow® Self Check Testsystem

Hinweis: Jegliche Abbildungen in diesem Blatt, die die Box oder die Beutel zeigen, dienen NUR ZUR VERGESSERUNG zu Darstellungszwecken. Richten Sie sich daher nach dem jeweiligen Verpackungs und Ihre entsprechenden Sets.


- WICHTIG!**
- ZUMERST** empfehlen wir Ihnen dringend, alle Anweisungen sorgfältig durchlesen und das kurze Lehrvideo auf unserer Website unter ptsdiagnostics.com anzusehen. Folgen Sie **DANN** den einzelnen Schritten zur Durchführung des Tests.
 - Öffnen Sie die Beutel erst dann, wenn Sie dazu angewiesen werden.
 - Achten Sie darauf, das Charge Nummer auf dem Analysegerät und den Charge Nummer auf dem Beutel entspricht.
 - In Innenräumen bei Temperaturen zwischen 18°C und 25°C und außerhalb von direktem Sonnenlicht verwenden.
 - Nicht verwenden, wenn das Produkt das Verfallsdatum überschritten hat.
 - Wenn das Set kürzlich bei Temperaturen außerhalb des empfohlenen Werts aufbewahrt wurde, bewahren Sie das Set mindestens eine Stunde bei Raumtemperatur auf, bevor Sie es verwenden.

Führen Sie den Test innerhalb von 15 Minuten durch.

6 Öffnen Sie den Folien-Patronenbeutel* NACH der Blutentnahme

- Führen Sie die Patrone sofort in das Analysegerät ein und verwenden Sie sie innerhalb von 2 Minuten.
- Reißen Sie den Folienbeutel an den seitlichen Einschnitten auf.

Vorsicht: Den Folienbeutel NICHT vor Auslösung dieses Verfahrensschritts öffnen. Die Patrone nach dem Öffnen des Beutels innerhalb von 2 Minuten verwenden. Die Patrone nicht verwenden, wenn der Folienbeutel beschädigt ist.

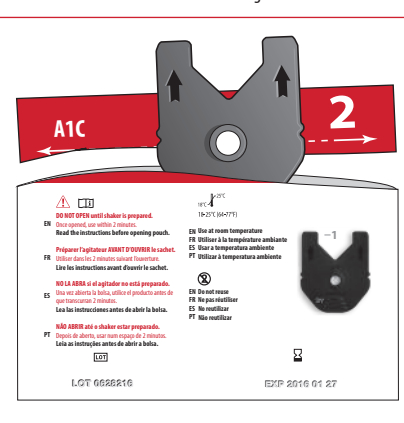


pts Diagnostics

1-877-870-5610 (gebührenfrei in USA und Kanada) oder +1-317-870-5610 (Direktwahl)
Sie dürfen uns gern anrufen und wir führen Sie durch den Test.

- Ändern Sie Ihre Medikation NICHT, sofern Sie keine Empfehlung von Ihrem Arzt oder medizinischen Berater erhalten haben.**
- Wenn Sie Fragen zu Ihrem A1C-Ergebnis haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder medizinischen Berater.

Vorsicht: Dieses Produkt enthält Stoffe tierischen Ursprungs und sollte daher als möglicher Krankheitserreger behandelt werden.

Wenn Sie das Lehrvideo auf unserer Website nicht aufrufen können, rufen Sie den Kundendienst unter 1-877-870-5610 (in den USA und Kanada gebührenfrei) oder unter +1-317-870-5610 (Direktwahl) an, der dann den Test mit Ihnen durchgeht.

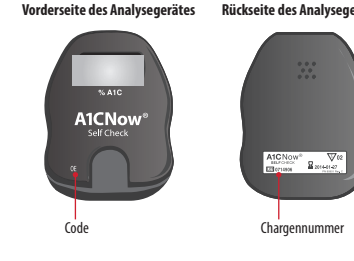


7 Patrone einsetzen

- Führen Sie die Testpatrone ein, bis ein "Click" zu hören ist.
- Die Codes auf dem Analysegerät und auf der Testpatrone müssen übereinstimmen.
- Wenn die Codes nicht übereinstimmen, rufen Sie den Kundendienst unter 1-877-870-5610 (in den USA und Kanada gebührenfrei) oder unter +1-317-870-5610 (Direktwahl) an.




Übereinstimmung der Chargennummern

Verwenden Sie das Analysegerät ausschließlich mit den im Originalset enthaltenen Materialien. Das Analysegerät kann nicht mehr verwendet werden, wenn die programmierte Anzahl von Tests durchgeführt wurde. Wenn eine andere Testpatrone eingesetzt wird, erscheint „001L“ auf dem Analysegerät.

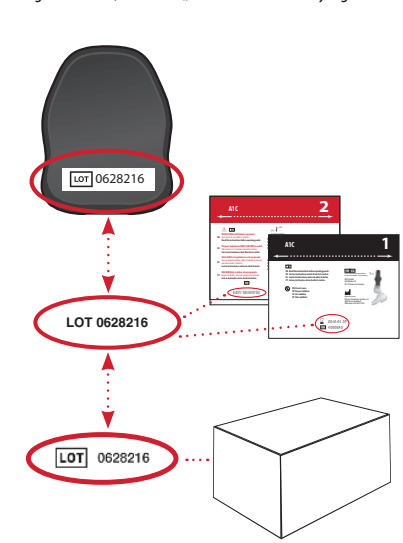

8 Shaker vorbereiten

Nehmen Sie die Basis vom Shaker ab.

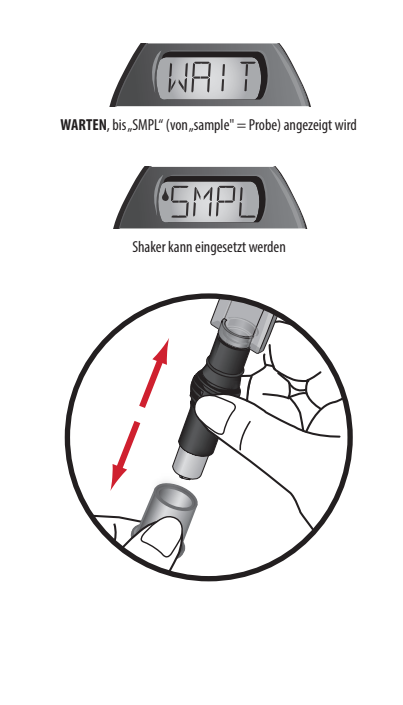

1 Shaker-Kunststoffbeutel öffnen*

Öffnen Sie den Folien-Patronenbeutel ERST bei Schritt 6.



9 Probe in die Patrone abgeben


- Stellen Sie sicher, dass sich das Analysegerät auf einer ebenen Fläche befindet.
- Drücken Sie die Patrone ganz hinunter, um die verdünnte Probe zu verteilen, und entfernen Sie sie sofort danach wieder.
- Entfernen Sie die Probentnahmenvorrichtung rasch von der Patrone.
- "RUN" wird angezeigt.




Das Analysegerät nicht mehr berühren, bis der Test abgeschlossen ist!

2 In den Finger stechen

- Waschen Sie Ihre Hände gründlich oder mit Alkohol reinigen und abtrocknen.
- Entfernen Sie die Verschlusskappe und drücken Sie die Lanzette in Ihren Finger.
- Den Finger leicht drücken, um ausreichend Blut zu erhalten.

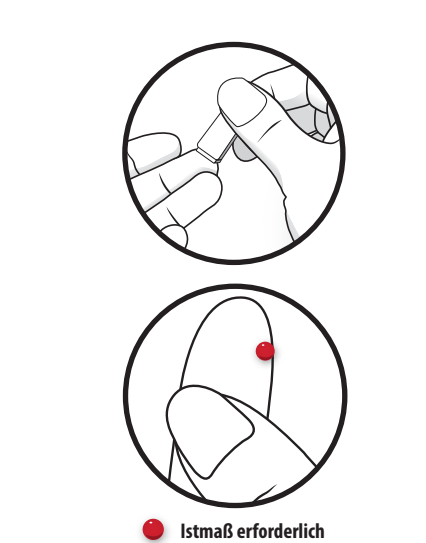


10 Ergebnisse in 5 Minuten

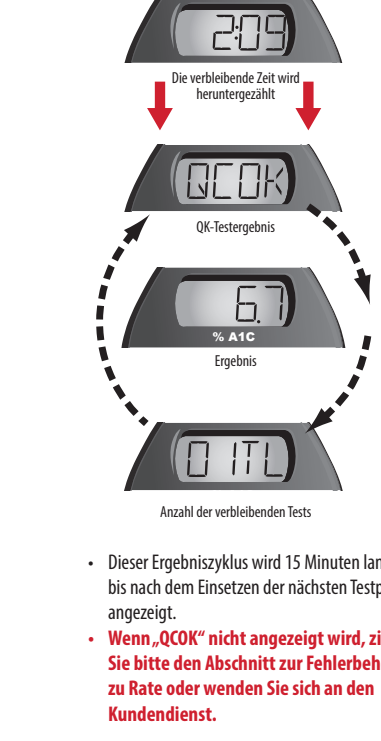

Dieser Ergebnisszyklus wird 15 Minuten lang oder bis nach dem Einsetzen der nächsten Testpatrone angezeigt.
Wenn „QC“ nicht angezeigt wird, ziehen Sie bitte den Abschnitt zur Fehlerbehebung zu Rate oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

3 Blut entnehmen

- Bringen Sie mit der Blutentnahmenvorrichtung vorsichtig das Blutropfen, um diesen aufzunehmen.
- Achten Sie darauf, dass die Blutentnahmenvorrichtung ausreichend gefüllt wird.

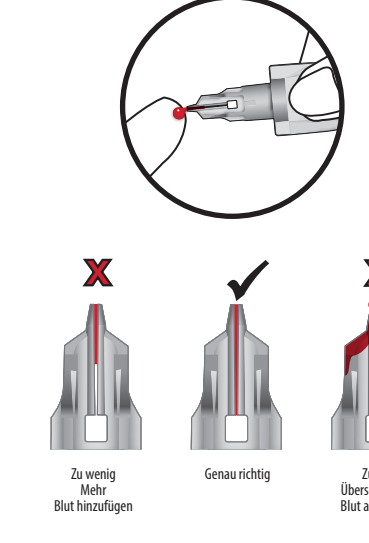

11 Entsorgung der Patrone/ Aufbewahrung des Analysegeräts


- Die Köpfe der Patrone im Hausmüll entsorgen.
- Bewahren Sie das Analysegerät für weitere Tests auf. Das Analysegerät zeigt beispielsweise „011L“ an, wenn ein Test übrig ist, und „001L“, wenn Sie sieben Ihren letzten Test verwendet haben.
- Halten Sie Ihr A1C-Ergebnis im Ergebnisprotokoll in Schritt 12 fest.
- Auf dem Analysegerät wird das Ergebnis 15 Minuten lang angezeigt. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.



HINWEIS: Verwenden Sie bei einem weiteren Test einen neuen Shaker, eine neue Blutentnahmenvorrichtung, eine neue Testpatrone und Lanzette aus demselben Set und beginnen Sie wieder bei Schritt 1.

4 Blutentnahmenvorrichtung einführen


- Setzen Sie die Blutentnahmenvorrichtung vollständig in den Shaker ein.
- Fest drücken und gleichzeitig vollständig hineindrücken!

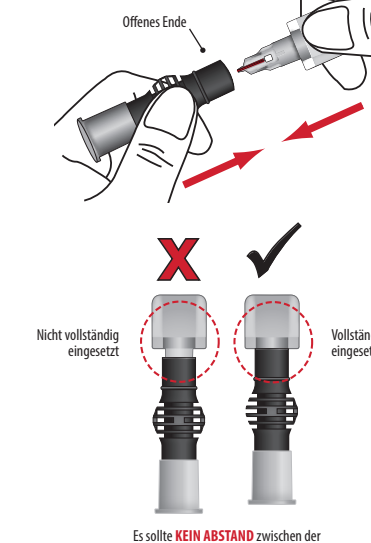

12 Protokoll-Ergebnis

Zeichnen Sie Ihren Fortschritt hier auf.


- Erfassen Sie Ihre A1C-Ergebnisse hier und nehmen Sie diese zum Termin bei Ihrem Arzt mit. Schreiben Sie Ihr A1C-Ziel in das dafür vorgesehene Feld.

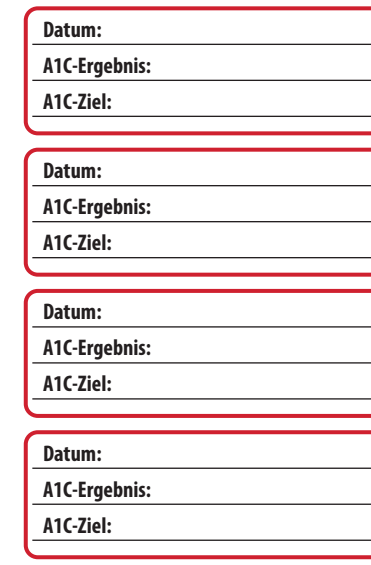

* Das Erscheinungsbild des abgebildeten Beutels kann vom tatsächlichen Erscheinungsbild abweichen.

5 Mischen

- Schütten Sie 6-8 Mal kräftig (etwa 5 Sekunden lang). Dadurch wird das Blut mit der Lösung vermischt.
- Stellen Sie den Shaker auf dem Tisch ab und bereiten Sie die Patrone vor.

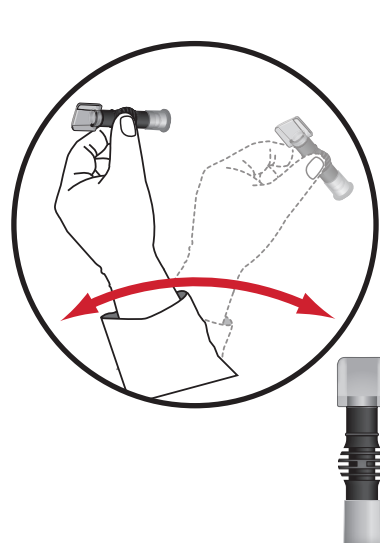

Auswertung des Testergebnisses

- Treffen Sie keine medizinisch relevante Entscheidung, bevor Sie mit Ihrem medizinischen Fachkraft gesprochen haben.**
- Wenn dieses Gerät verwendet wird, um eine bestehende Krankheit zu überwachen, passen Sie die Behandlung nur dann an, wenn Sie eine entsprechende Schulung durchlaufen haben.



* Das Erscheinungsbild des abgebildeten Beutels kann vom tatsächlichen Erscheinungsbild abweichen.

Présentation et guide de référence rapide



A1CNow® Self Check Système d'analyse

Remarque : Tous les exemples de boîte ou de sachets sont illustrés à titre indicatif SEULEMENT. Veuillez vous référer à l'emballage original avec votre kit spécifique.


- IMPORTANT !**
- TOUT D'ABORD**, nous vous recommandons fortement de lire attentivement toutes les instructions et de regarder la brève vidéo d'instructions sur notre site Web à l'adresse ptsdiagnostics.com. **ENSUITE**, suivez toutes les étapes pendant que vous effectuez le test.
 - N'ouvrez pas les sachets avant d'y être invité.
 - Assurez-vous que le numéro de lot de l'analyseur correspond aux numéros de lot sur les sachets.
 - Utilisez à l'intérieur d'une température comprise entre 18°C et 25°C (64°F et 77°F) et à l'abri des rayons du soleil.
 - N'utilisez pas le produit si la date d'expiration est dépassée.
 - Si le kit a récemment été exposé à des températures supérieures à celles recommandées, laissez le kit à température ambiante pendant au moins une heure avant utilisation.

Terminez le test dans un délai de 15 minutes.

6 Ouvrez le sachet contenant la cartouche* APRÈS le prélèvement de sang

- Insérez immédiatement la cartouche dans l'analyseur et utilisez-la dans les deux minutes.
- Découpez le sachet au niveau des encoches latérales pour l'ouvrir.

Mise en garde : N'ouvrez PAS le sachet avant cette étape. Utilisez dans les deux minutes après l'ouverture. N'utilisez pas un sachet endommagé.

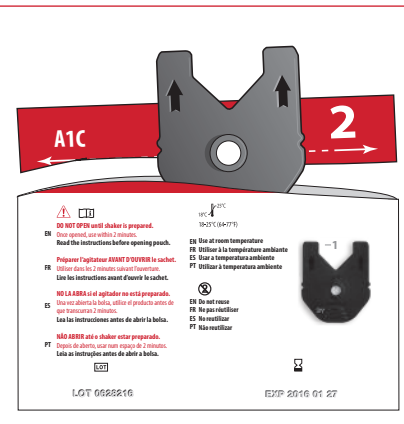


pts Diagnostics

1-877-870-5610 (sans frais) ou +1-317-870-5610 (ligne directe)
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous guiderons tout au long du test.

- NE MODIFIEZ JAMAIS** votre manière votre posologie sans avoir été invité par votre médecin traitant ou spécialiste de soins de santé.
- Pour toute question relative au résultat de votre test A1C, contactez votre médecin traitant ou prestataire de soins de santé.


Mise en garde : Cet appareil contient des matières d'origine animale et doit être manipulé en tant que porteur ou transmetteur éventuel de maladie.

Si vous ne pouvez pas accéder à la vidéo d'instructions sur notre site Web, nous vous encourageons à appeler le service clientèle au 1-877-870-5610 (sans frais aux États-Unis et au Canada) ou au +1-317-870-5610 (direct) qui vous guidera à travers le test.

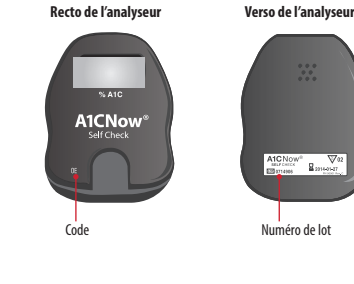


7 Insérez la cartouche

- Mettez en place la cartouche de test jusqu'à entendre un clic.
- Les codes de l'analyseur et de la cartouche de test doivent être identiques.
- Si les codes ne sont pas identiques, contactez le service clientèle au 1-877-870-5610 (sans frais aux États-Unis et au Canada) ou +1-317-870-5610 (ligne directe).

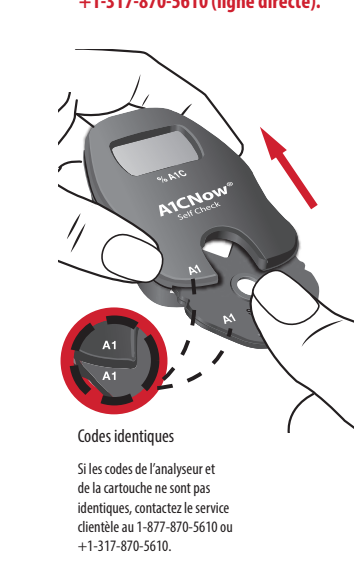


Faites correspondre les numéros de lot

Utilisez uniquement l'analyseur avec le matériel inclus dans le kit d'origine. L'analyseur expirera une fois le nombre programmé de tests épuisé. Si une autre cartouche de test est insérée, l'analyseur affichera «001L».

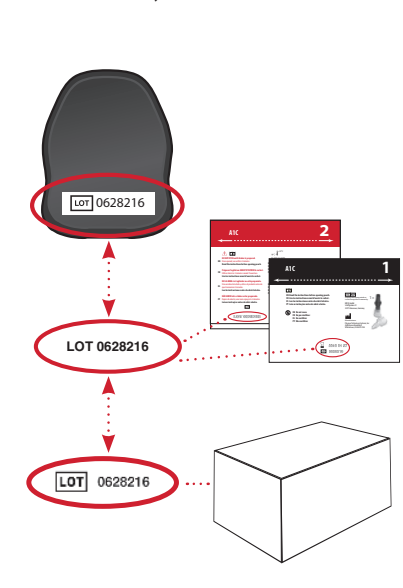

8 Préparez l'agitateur

Retirez la base de l'agitateur.

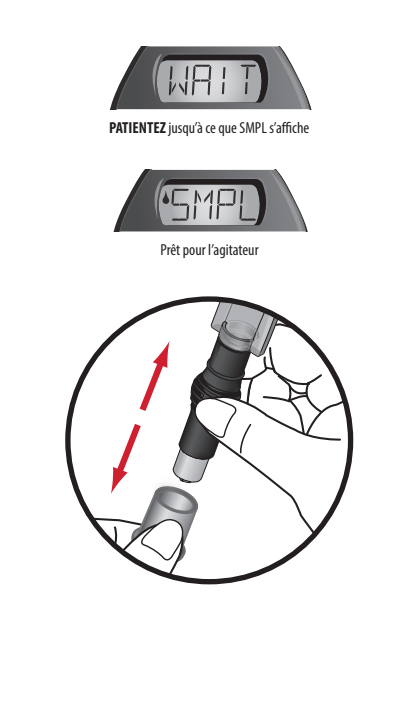

1 Ouvrez le sachet en plastique contenant l'agitateur*

N'ouvrez PAS le sachet contenant la cartouche avant l'étape 6.



9 Versez l'échantillon dans la cartouche


- Assurez-vous que l'analyseur se trouve sur une surface plane.
- Appuyez complètement pour verser l'échantillon dilué et retirez-le en un mouvement continu.
- Retirez rapidement l'échantillonneur de la cartouche.
- La mention «RUN» s'affiche.




Ne manipulez pas à nouveau l'agitateur tant que le test n'est pas terminé!

2 Effectuez le prélèvement au doigt

- Lavez-vous les mains ou nettoyez-les à l'alcool, puis séchez les avant d'effectuer le test.
- Retirez le capuchon et appuyez sur la lancette pour piquer le doigt.
- Appuyez délicatement sur le doigt pour obtenir un volume de sang adéquat.

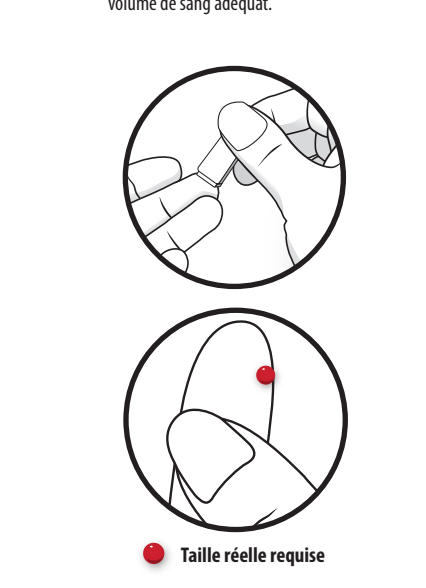


10 Résultats en 5 minutes

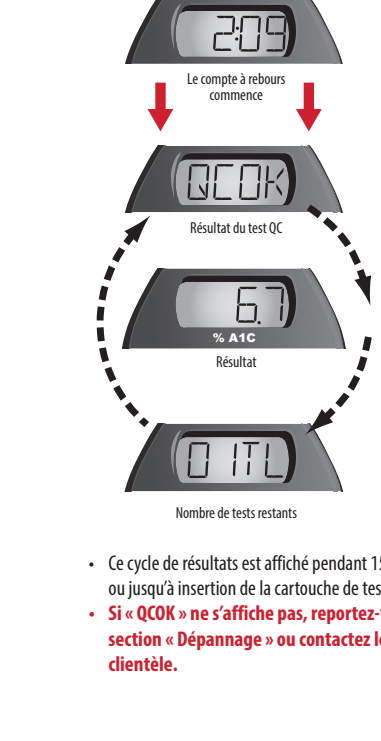

Ce cycle de résultats est affiché pendant 15 minutes ou jusqu'à insertion de la cartouche de test suivante. Si «QC» ne s'affiche pas, reportez-vous à la section «Dépannage» ou contactez le service clientèle.

3 Recueillez le sang

- Pressez délicatement le collecteur de sang sur le dessus de la goutte de sang pour le remplir.
- Assurez-vous que le collecteur est correctement rempli.

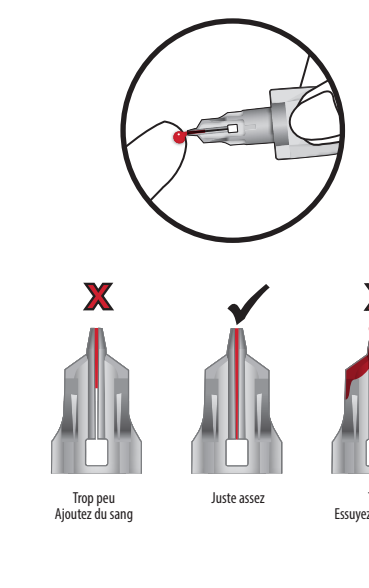

11 Jetez la cartouche/ conservez l'analyseur


- Jetez la cartouche avec vos ordures ménagères.
- Conservez l'analyseur pour des tests ultérieurs.
- L'analyseur affichera, par exemple, «011L» s'il ne reste plus qu'un test, et «001L» si vous venez d'utiliser le dernier test.
- Enregistrez votre résultat A1C dans le journal des résultats de l'étape 12.
- L'analyseur affichera le résultat pendant 15 minutes, puis s'éteint automatiquement.



REMARQUE : Pour effectuer un nouveau test, utilisez un nouvel agitateur, une nouvelle prélèvement sanguin, une nouvelle cartouche de test et une nouvelle lancette du même kit et retournez à l'étape 1.

4 Insérez le collecteur de sang


- Insérez entièrement le collecteur de sang dans le corps de l'agitateur.
- Exercez une pression suffisante tout en tournant pour une insertion complète.

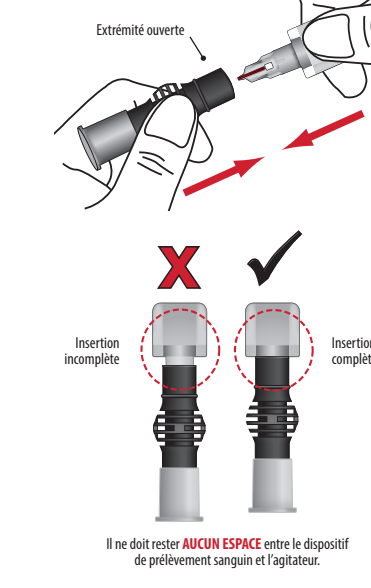

12 Enregistrez le résultat

Consignez ici votre progression.


- Enregistrez les résultats de vos tests A1C sur cette feuille, puis apportez-la à votre prestataire de consultation auprès de votre médecin. Indiquez votre objectif A1C dans la zone prévue à cet effet.

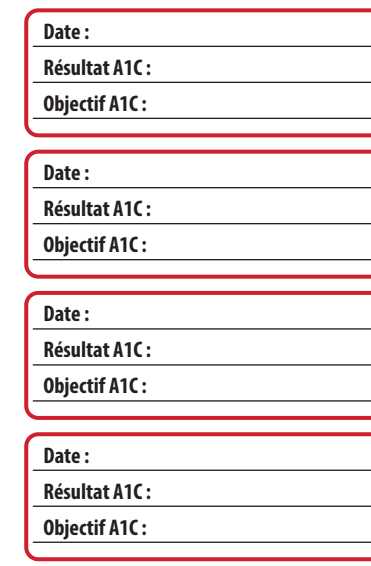

* Les illustrations des sachets peuvent varier.

5 Mélangez

- Agitez vigoureusement 6 à 8 fois (environ 5 secondes). Le sang se mélange alors avec la solution.
- Placez l'agitateur droit sur la table pendant la préparation de la cartouche.

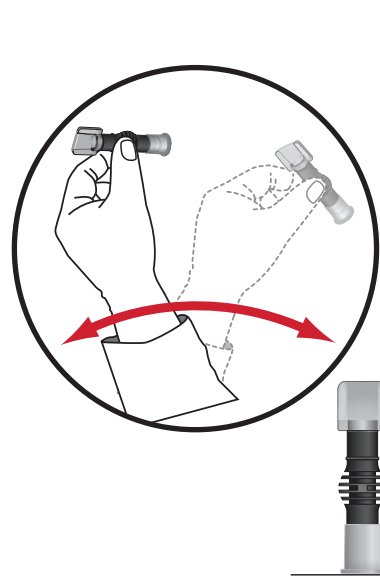

Interprétation des résultats

- Ne prenez aucune décision liée à votre santé sans d'abord consulter votre médecin agréé.**
- Lorsque ce dispositif est utilisé pour contrôler une maladie existante, vous ne devez ajuster le traitement que si vous avez reçu la formation qui vous permet de le faire.



* Les illustrations des sachets peuvent varier.

Panoramica e guida di riferimento rapido



A1CNow® Self Check Sistema di analisi

Nota: tutte le istanze relative alla confezione o alle buste presenti in questo foglio illustrativo sono ESCLUSIVAMENTE a scopo rappresentativo. Fare riferimento alla confezione finita con il kit specifico.

- IMPORTANTE!**
- INNANZITUTTO**, consigliamo caldamente di leggere con attenzione

